

## 公司外周产品线 Peripheral Pipelines



**D-Konquer™**  
外周球囊扩张导管

18/35系统兼备型号齐全



**D-Kutting™**  
刻痕球囊扩张导管

可以过弯的切割类球囊



**D-Kaptain™**  
高压球囊导管套件

国产最高压力 RBP 26atm



**Dissolve™ AV**  
外周刻痕药物球囊

全球独家: 高压+刻痕+药涂

## 国产最高爆破压 Highest RBP

品牌	M ...	G ...	DKaptain	DKonquer	F ...	C ...
属性	进口	进口	国产	国产	进口	进口
最高RBP	24atm	24atm	26atm	24atm	24atm	30atm

刚柔并济  
一应俱全

### 锐角球囊近端

减小回撤阻力  
球囊近端锥角 < 30°

### 球囊防滑

提高扩张时锚定性  
摩擦系数高于  
同类产品25%以上

### 柔性尖端

减少血管内壁划伤  
亲水涂层  
类硅胶材质


### 超短尖端

减少对非靶血管干扰  
高精度激光焊接

### 高爆破压

提高扩张成功率  
最高RBP 26atm

## 一体化套件 One-step Solution

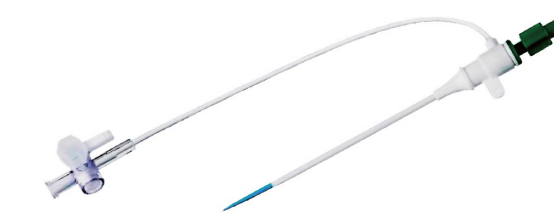

配套5F/6F/7F导管鞘有效长度均为5cm





型号规格	球囊直径 (mm)	球囊长度 (mm)	标称压力 (atm)	额定爆破压	兼容导管鞘
HPA50-3020A5	3	20	10	26	5F
HPA50-3030A5	3	30	10	26	5F
HPA50-3040A5	3	40	10	26	5F
HPA50-3060A5	3	60	10	26	5F
HPA50-3080A5	3	80	10	26	5F
HPA50-30100A5	3	100	10	22	5F
HPA50-30120A5	3	120	10	22	5F
HPA50-30150A5	3	150	10	22	5F
HPA50-4020A5	4	20	8	26	5F
HPA50-4030A5	4	30	8	26	5F
HPA50-4040A5	4	40	8	26	5F
HPA50-4060A5	4	60	8	26	5F
HPA50-4080A5	4	80	8	26	5F
HPA50-40100A5	4	100	8	22	5F
HPA50-40120A5	4	120	8	22	5F
HPA50-40150A5	4	150	8	22	5F
HPA50-5020A5	5	20	8	26	5F
HPA50-5030A5	5	30	8	26	5F
HPA50-5040A5	5	40	8	26	5F
HPA50-5060A5	5	60	8	26	5F
HPA50-5080A5	5	80	8	26	5F
HPA50-50100A5	5	100	8	22	5F
HPA50-50120A5	5	120	8	22	5F
HPA50-50150A5	5	150	8	22	5F
HPA50-6020A5	6	20	8	26	5F
HPA50-6030A5	6	30	8	26	5F
HPA50-6040A5	6	40	8	26	5F
HPA50-6060A5	6	60	8	26	5F
HPA50-6080A5	6	80	8	26	5F
HPA50-60100A5	6	100	8	22	5F
HPA50-60120A5	6	120	8	22	5F
HPA50-60150A5	6	150	8	22	5F

型号规格	球囊直径 (mm)	球囊长度 (mm)	标称压力 (atm)	额定爆破压	兼容导管鞘
HPA50-7020A5	7	20	8	22	5F
HPA50-7030A5	7	30	8	22	5F
HPA50-7040A5	7	40	8	22	5F
HPA50-7060A5	7	60	8	22	5F
HPA50-7080A5	7	80	8	22	5F
HPA50-70100A5	7	100	8	18	5F
HPA50-70120A5	7	120	8	18	5F
HPA50-70150A5	7	150	8	18	5F
HPA50-8020A6	8	20	8	22	6F
HPA50-8030A6	8	30	8	22	6F
HPA50-8040A6	8	40	8	22	6F
HPA50-8060A6	8	60	8	22	6F
HPA50-8080A6	8	80	8	22	6F
HPA50-80100A6	8	100	8	18	6F
HPA50-80120A6	8	120	8	18	6F
HPA50-80150A6	8	150	8	18	6F
HPA50-9020A6	9	20	8	18	6F
HPA50-9030A6	9	30	8	18	6F
HPA50-9040A6	9	40	8	18	6F
HPA50-9060A6	9	60	8	18	6F
HPA50-9080A6	9	80	8	18	6F
HPA50-10020A6	10	20	8	14	6F
HPA50-10030A6	10	30	8	14	6F
HPA50-10040A6	10	40	8	14	6F
HPA50-10060A6	10	60	8	14	6F
HPA50-10080A6	10	80	8	14	6F
HPA50-12020A7	12	20	10	14	7F
HPA50-12030A7	12	30	10	14	7F
HPA50-12040A7	12	40	10	14	7F
HPA50-12060A7	12	60	10	14	7F
HPA50-12080A7	12	80	10	14	7F

型号规格	球囊直径 (mm)	球囊长度 (mm)	标称压力 (atm)	额定爆破压	兼容导管鞘
HPA75-3020B5	3	20	10	26	5F
HPA75-3030B5	3	30	10	26	5F
HPA75-3040B5	3	40	10	26	5F
HPA75-3060B5	3	60	10	26	5F
HPA75-3080B5	3	80	10	26	5F
HPA75-30100B5	3	100	10	22	5F
HPA75-30120B5	3	120	10	22	5F
HPA75-30150B5	3	150	10	22	5F
HPA75-4020B5	4	20	8	26	5F
HPA75-4030B5	4	30	8	26	5F
HPA75-4040B5	4	40	8	26	5F
HPA75-4060B5	4	60	8	26	5F
HPA75-4080B5	4	80	8	26	5F
HPA75-40100B5	4	100	8	22	5F
HPA75-40120B5	4	120	8	22	5F
HPA75-40150B5	4	150	8	22	5F
HPA75-5020B5	5	20	8	26	5F
HPA75-5030B5	5	30	8	26	5F
HPA75-5040B5	5	40	8	26	5F
HPA75-5060B5	5	60	8	26	5F
HPA75-5080B5	5	80	8	26	5F
HPA75-50100B5	5	100	8	22	5F
HPA75-50120B5	5	120	8	22	5F
HPA75-50150B5	5	150	8	22	5F
HPA75-6020B5	6	20	8	26	5F
HPA75-6030B5	6	30	8	26	5F
HPA75-6040B5	6	40	8	26	5F
HPA75-6060B5	6	60	8	26	5F
HPA75-6080B5	6	80	8	26	5F
HPA75-60100B5	6	100	8	22	5F
HPA75-60120B5	6	120	8	22	5F
HPA75-60150B5	6	150	8	22	5F

型号规格	球囊直径 (mm)	球囊长度 (mm)	标称压力 (atm)	额定爆破压	兼容导管鞘
HPA75-7020B5	7	20	8	22	5F
HPA75-7030B5	7	30	8	22	5F
HPA75-7040B5	7	40	8	22	5F
HPA75-7060B5	7	60	8	22	5F
HPA75-7080B5	7	80	8	22	5F
HPA75-70100B5	7	100	8	18	5F
HPA75-70120B5	7	120	8	18	5F
HPA75-70150B5	7	150	8	18	5F
HPA75-8020B6	8	20	8	22	6F
HPA75-8030B6	8	30	8	22	6F
HPA75-8040B6	8	40	8	22	6F
HPA75-8060B6	8	60	8	22	6F
HPA75-8080B6	8	80	8	22	6F
HPA75-80100B6	8	100	8	18	6F
HPA75-80120B6	8	120	8	18	6F
HPA75-80150B6	8	150	8	18	6F
HPA75-9020B6	9	20	8	18	6F
HPA75-9030B6	9	30	8	18	6F
HPA75-9040B6	9	40	8	18	6F
HPA75-9060B6	9	60	8	18	6F
HPA75-9080B6	9	80	8	18	6F
HPA75-10020B6	10	20	8	14	6F
HPA75-10030B6	10	30	8	14	6F
HPA75-10040B6	10	40	8	14	6F
HPA75-10060B6	10	60	8	14	6F
HPA75-10080B6	10	80	8	14	6F
HPA75-12020B7	12	20	10	14	7F
HPA75-12030B7	12	30	10	14	7F
HPA75-12040B7	12	40	10	14	7F
HPA75-12060B7	12	60	10	14	7F
HPA75-12080B7	12	80	10	14	7F

型号规格	球囊直径 (mm)	球囊长度 (mm)	标称压力 (atm)	额定爆破压	兼容导管鞘
HPA130-3020C5	3	20	10	26	5F
HPA130-3030C5	3	30	10	26	5F
HPA130-3040C5	3	40	10	26	5F
HPA130-3060C5	3	60	10	26	5F
HPA130-3080C5	3	80	10	26	5F
HPA130-30100C5	3	100	10	22	5F
HPA130-30120C5	3	120	10	22	5F
HPA130-30150C5	3	150	10	22	5F
HPA130-4020C5	4	20	8	26	5F
HPA130-4030C5	4	30	8	26	5F
HPA130-4040C5	4	40	8	26	5F
HPA130-4060C5	4	60	8	26	5F
HPA130-4080C5	4	80	8	26	5F
HPA130-40100C5	4	100	8	22	5F
HPA130-40120C5	4	120	8	22	5F
HPA130-40150C5	4	150	8	22	5F
HPA130-5020C5	5	20	8	26	5F
HPA130-5030C5	5	30	8	26	5F
HPA130-5040C5	5	40	8	26	5F
HPA130-5060C5	5	60	8	26	5F
HPA130-5080C5	5	80	8	26	5F
HPA130-50100C5	5	100	8	22	5F
HPA130-50120C5	5	120	8	22	5F
HPA130-50150C5	5	150	8	22	5F
HPA130-6020C5	6	20	8	26	5F
HPA130-6030C5	6	30	8	26	5F
HPA130-6040C5	6	40	8	26	5F
HPA130-6060C5	6	60	8	26	5F
HPA130-6080C5	6	80	8	26	5F
HPA130-60100C5	6	100	8	22	5F
HPA130-60120C5	6	120	8	22	5F
HPA130-60150C5	6	150	8	22	5F

型号规格	球囊直径 (mm)	球囊长度 (mm)	标称压力 (atm)	额定爆破压	兼容导管鞘
HPA130-7020C5	7	20	8	22	5F
HPA130-7030C5	7	30	8	22	5F
HPA130-7040C5	7	40	8	22	5F
HPA130-7060C5	7	60	8	22	5F
HPA130-7080C5	7	80	8	22	5F
HPA130-70100C5	7	100	8	18	5F
HPA130-70120C5	7	120	8	18	5F
HPA130-70150C5	7	150	8	18	5F
HPA130-8020C6	8	20	8	22	6F
HPA130-8030C6	8	30	8	22	6F
HPA130-8040C6	8	40	8	22	6F
HPA130-8060C6	8	60	8	22	6F
HPA130-8080C6	8	80	8	22	6F
HPA130-80100C6	8	100	8	18	6F
HPA130-80120C6	8	120	8	18	6F
HPA130-80150C6	8	150	8	18	6F
HPA130-9020C6	9	20	8	18	6F
HPA130-9030C6	9	30	8	18	6F
HPA130-9040C6	9	40	8	18	6F
HPA130-9060C6	9	60	8	18	6F
HPA130-9080C6	9	80	8	18	6F
HPA130-10020C6	10	20	8	14	6F
HPA130-10030C6	10	30	8	14	6F
HPA130-10040C6	10	40	8	14	6F
HPA130-10060C6	10	60	8	14	6F
HPA130-10080C6	10	80	8	14	6F
HPA130-12020C7	12	20	10	14	7F
HPA130-12030C7	12	30	10	14	7F
HPA130-12040C7	12	40	10	14	7F
HPA130-12060C7	12	60	10	14	7F
HPA130-12080C7	12	80	10	14	7F

DKaptain全系列产品适配导丝长度: A-100cm; B-150cm; C-260cm  
适配导管长度: A-50cm; B-75cm; C-130cm

- 适用于治疗自体或人造透析用动静脉瘘的堵塞病变并适用于外周血管系统（包括髂动脉、股动脉、腿动脉、胫动脉、腓动脉、锁骨下动脉和肾动脉）的经皮腔内血管成形术（PTA）
- 球囊长度不超过120mm的球囊扩张导管还适用于治疗胆管狭窄

鼎科医疗技术（苏州）有限公司  
0512-69880808  
cs@dkmedtech.com  
www.dkmedtech.com  
苏州工业园区苏虹西路9号新虹产业园5号楼

